

i+1

SLV16WH

音波入れ歯洗浄器

取扱い上のご注意

ご使用後は

- インナーケースを水ですすぎ、乾いた布などで水気を取ってから本体に戻してください。インナーケースのふたも元通り閉めてください。

お手入れ

- インナーケースは定期的には中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで汚れを落とし、水でよくすすいでください。その際、必ず本体から外した状態で行ってください。
- 本体の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は水でうすめた中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽く拭き取り、乾いた布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは絶対に使用しないでください。

UVランプの交換について

- UVランプはご自身で交換することができません。弊社商品お問い合わせセンターにUVランプ交換を依頼してください。[価格:3,000円(UVランプ、工賃込み)] ※送料はお客様のご負担になります。

仕様

※UVランプ寿命および電池使用可能時間は目安であり使用状況により異なります。
※本製品は防水仕様ではありません。※充電電池(1.2V)は推奨しません。

振動周波数	18,000Hz	電池使用可能時間	約20日間(※1日1回20~25分アルカリ乾電池使用時)
UV波長	265nm	使用可能温度	5℃~35℃
UVランプ寿命	約1年間 ※1日2回使用時	寸法	W104×H100×D124mm
電源	DC4.5V 単3形乾電池×3本(別売) ACアダプター 弊社型番 ACM300(別売) 入力:AC100V 50/60Hz 出力:4.5V	インナーケース内寸	W83×H38×D60mm
		質量	約365g(乾電池除く)
		材質	本体/ABS インナーケース/PS

保証書

品名	音波入れ歯洗浄器		
型名	SLV16WH		
お客様	様		
ご住所	□□□-□□□□		
電話			
電子メールアドレス			
保証期間	期間(お買い上げの日から)		
	6ヶ月		
	お買い上げ日	年	月 日

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店または、弊社商品お問い合わせセンターに修理をお申し付けください。

販売店
店名
住所
電話
電子メールアドレス
メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせください。
※本保証書にご記入いただいた個人情報は、ご相談、修理対応に利用させていただきます。お客様の個人情報は適切に管理し、お客様の承諾を得た場合、正当な理由がある場合を除き、第三者へ開示いたしません。

無料保証規定

1. 正常な使用状態(取扱い上のご注意、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合にはお買い上げの販売店または弊社商品お問い合わせセンターが無料修理をさせていただきます。弊社の判断により製品を交換させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示の上、お申し付けください。
3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には、弊社商品お問い合わせセンターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
(1) 本書のご提示がない場合
(2) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名のご記入がない場合、および本書の字句を書き替えられた場合

- (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
- (4) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
- (6) 消耗した部品の交換
- (7) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
5. 付属品・消耗品は保証対象外とさせていただきます。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

YAZAWA
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5812-1051
http://www.yazawa.co.jp

この度は当社の音波入れ歯洗浄器をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、思わぬ事故につながる可能性があります。

ご使用前に必ず本書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意

本書には、ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐための安全に関する注意事項を記載しています。次の表示・図記号を十分に理解してから本文を読みになり、記載事項は必ずお守りください。



注意

人が障害を負う危険および物的損害の発生が想定される内容を示します。



図記号の説明



○記号は禁止の行為であることを示しています。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示を示しています。
図の中に具体的な指示内容が描かれています。



注意



禁止

可燃もしくは爆発性のガスなどが発生している場所では使用しない。
引火・爆発の原因となります。



禁止

ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定なところで使用しない。
落下による故障の原因となります。



禁止

落としたりぶつかけたり、強い振動や衝撃を加えない。



禁止

分解・改造・部品の変更・修理はしない。

分解禁止



禁止

直射日光の当たる場所や炎天下の車内など異常に高温になる場所での使用・保管はしない。



禁止

点灯中のUVランプは直視しない。
人体に害のないランプを使用しておりますが、念のためご注意ください。



強制

乾電池を使用するときは次のことを守る。
乾電池の破裂・液漏れ・発熱によるけがや火災、周囲への汚損の原因となります。

- 指定以外の乾電池は使用しない。
- 極性表示⊕と⊖は正しく入れる。
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたり火の中に投入しない。
- 乾電池に記載されている使用推奨期限を超えたものは使用しない。
- 使用済みの乾電池は各地方自治体の廃棄区分に従う。



禁止

本製品は防水仕様ではないため、ぬれた手で触れたり、水がかかったり湿気の多い場所、雨・きりなどが直接入り込むような場所では使用しない。
製品内部に水が入ると感電・故障の原因となります。



強制

本体ふた、電池カバーの開閉などの際は、指などはさまないよう注意する。
けがの原因となります。



接触禁止

電池ケース内の電極部分やアダプターのジャックに直接触れない。
感電・故障の原因となります。



禁止

本体や包装用のビニール袋を乳幼児、小さな子どもやペットの手の届く場所に置かない。
ビニール袋による窒息・けがなど思わぬ事故の原因となります。



強制

ACアダプター使用時は指定のものを使用する。
また、出力は4.5V以外では使用しない。



強制

● 種類の違う乾電池や、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない。


- 水にぬらしたり、ぬれた手で触れない。
- 乾電池を乳幼児、小さな子どもやペットの手の届く場所に置かない。
- 長期間(1ヶ月以上)使用しないときは乾電池を抜く。

液漏れし、皮膚や衣類に液が付着したときは水でよく洗い流し、医師にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になりますので、目はこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。

■ 使用上のご注意

- 付着した黄ばみ、ヤニは本製品では落とせません。ご使用の入れ歯のお手入れ方法に従って洗浄してください。
- 必ず本体からインナーケースを取り出した状態で水を入れてください。(本製品は防水仕様ではありません。) 本体にインナーケースを取り付けたまま水を入れると本体に水がかかり、故障の原因となります場合があります。
- 貴金属、ジュエリーなど入れ歯や歯ブラシ以外のものには使用しないでください。
- 60℃以上のお湯では使用しないでください。入れ歯が変形または変色することがあります。
- 長期間(1ヶ月以上)ご使用にならないときは乾電池またはACアダプターを外し、インナーケースと本体の水気をしっかりと取ってから保管してください。
- 本体内に異物がないことを確認してからインナーケースをセットしてください。

■ 各部の名称

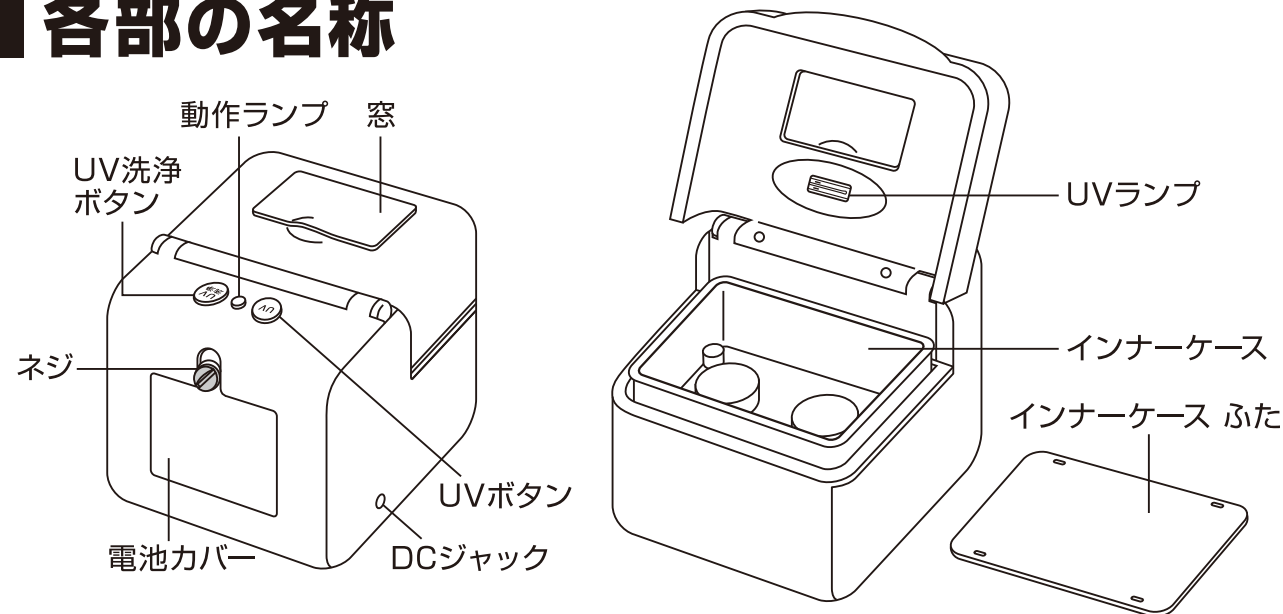


■ 電源について

〈注意〉

- ACアダプターをご使用になる際は必ず指定のものをご使用ください。それ以外のアダプターをご使用になられると故障の原因となります。
- ACアダプターをご使用になると乾電池からの電源供給は遮断されます。
- 乾電池でご使用になられる際は必ずACアダプターを外してください。

乾電池(別売)で使用する場合

- 1 本体裏面にあるネジをマイナスドライバーなどで回して電池カバーを外し、表示に従い正しく単3形乾電池×3本(別売)を入れてください。
- 2 乾電池を入れ終わったら電池カバーを元通りしっかりと閉めます。
※電池カバーを開閉する際に指など傷つけないよう注意してください。

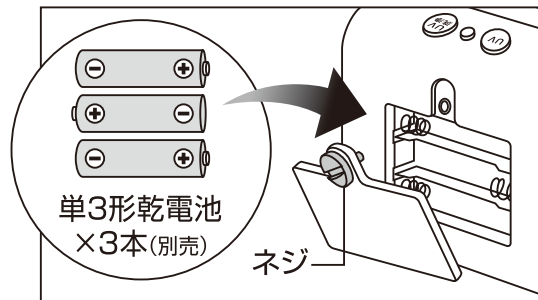

ACアダプター(別売)で使用する場合

[弊社型番 ACM300(別売) 入力:AC100V 50/60Hz 出力:4.5V]をご使用ください。

- 1 ACアダプターACM300の出力を4.5Vに設定してください。
- 2 本体側面にあるDCジャックにACアダプターのコネクタを差し込み、ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込んでください。

■ ご使用方法

音波洗浄+UV除菌で使用する場合

※水平で安定した場所に設置してください。

- 1 本体のふたを開けて中に入っているインナーケースを取り外します。
※インナーケースは本体とはめ込み式になっていますので、本体を押さえながら取り外してください。
- 2 洗浄したい入れ歯などを軽く水洗いしたあと、インナーケースに入れ、水をケースの8分目までそそぎます。
※60℃以上のお湯では使用しないでください。入れ歯が変形または変色することがあります。
※インナーケースいっぱいに入水すると動作中こぼれ、故障の原因となります。
- 3 インナーケースを本体に戻し、上から軽く押さえて本体へはめ直してください。ふたを閉め、UV洗浄ボタンを押すと音波洗浄が開始されます。洗浄中は動作ランプが赤と青に交互に点滅します。
※インナーケースのふたは外したまま洗浄してください。
※インナーケースを本体に戻す際は、本体に水がかからないようご注意ください。
- 4 約5分後に音波洗浄が完了し、自動でUV除菌が開始されます。除菌中は動作ランプが青色に点滅します。
- 5 約20分後にUV除菌が完了し、自動で止まります。完了すると動作ランプは消灯します。
- 6 洗浄(除菌)が完了したら、インナーケースから入れ歯を取りだしてから、インナーケースを本体から外して水を捨ててください。

※動作中本体のふたを開くと自動停止します(安全機能)

UV除菌のみで使用する場合

※水平で安定した場所に設置してください。

※UV除菌のみを行う場合、インナーケースに水を入れる必要はありません。

- 1 本体のふたを開けて中に入っているインナーケースに除菌したい入れ歯などを入れます。
- 2 本体のふたを閉め、UVボタンを押すとUV除菌が開始されます。除菌中は動作ランプが青色に点滅します。
※インナーケースのふたは外したまま除菌してください。
- 3 約20分後にUV除菌が完了し、自動で止まります。完了すると動作ランプは消灯します。
- 4 除菌が完了したら、インナーケースから入れ歯を取り出してください。


※動作中本体のふたを開くと自動停止します(安全機能)

使用を中止したい場合は

動作ランプが消えるまでUV洗浄ボタンもしくはUVボタンを長押ししてください。
または、本体のふたを開けると自動で停止します。

歯ブラシの洗浄をする場合

ふたについている窓を開けて歯ブラシを差し込んでください。
※操作は上記ご使用方法をご参照ください。

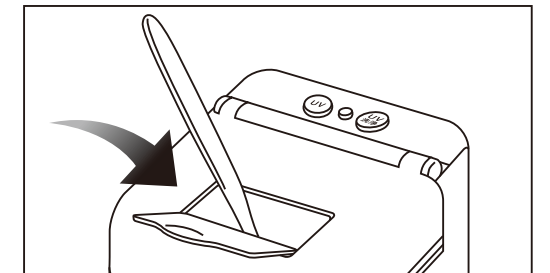

入れ歯ケースとして使用する場合

本製品を入れ歯ケースとして使用する場合は、インナーケースのふたをご利用ください。